

Συσκευή προστασίας πηλών μίας χρήσης / απωθητήρας Ring Protect™
Οδηγίες χρήσης

Αναφ. Όχι.: 0221-060070150, 0221-080090150, 0221-120130150, 0221-150160150, 0221-180190250, 0221-180190200, 0221-220230250,
0221-220230200, 0221-270280250, 0221-320330250



Επαφή πληροφοριών:
Τηλέφωνο/Φαξ: + 44 115 9704
800



MDML INTL LTD. 10 McCurtain Hill Clonakilty, Co.
Cork, P85 K230, Δημοκρατία της Ιρλανδίας



GRE
IFU-DRA-GRE_08



Προσοχή:

Οι οδηγίες που παρέχονται στο παρόν δεν προορίζονται να χρησιμεύσουν ως ένα ολοκληρωμένο εγχειρίδιο για χειρουργικές τεχνικές που σχετίζονται με τη χρήση του Προστατευτικού / Αναστολέα τραυμάτων. Η απόκτηση επάρκειας στις χειρουργικές τεχνικές απαιτεί άμεση συνεργασία με την εταιρεία μας ή εξουσιοδοτημένο διανομέα για πρόσβαση σε λεπτομερείς τεχνικές οδηγίες, συμβουλευτική επαγγελματική ιατρική βιβλιογραφία και πλήρη εκπαίδευση υπό την καθοδήγηση ενός χειρουργού ειδικευμένου σε ελάχιστα επεμβατικές διαδικασίες. Πριν από τη χρήση του Veress Needle, σας συμβουλευόμαστε ανεπιφύλακτα μια διεξοδική εξέταση όλων των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο. Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά χειρουργικά αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένου του τραυματισμού του ασθενούς, της μόλυνσης, της μόλυνσης, της διασταυρούμενης μόλυνσης ή του θανάτου.

Προϊόν περιγραφή:

Διαθέσιμος Προστατευτικό τραυμάτων / Retractor παρέχει 360° του περιφερειακός, ατραυματικός ανάκληση, διατηρεί την υγρασία στο τομή site, μειώνει επιπτώσεις χειρουργική περιοχή μόλυνση εξής χειρουργικές επεμβάσεις και εμποδίζει τη μεταφορά του καρκίνου κύτταρα σε κοιλιακός τείχος κατά την διάρκεια ογκολογική χειρουργική και όγκος μετακίνηση. Ο αυτοσυμπιέσιμο σχέδιο της μιας χρήσης Πληγή Προστάτης / Συσπειρωτήρας επιτρέπει hands-free δικαίωμα χρησιμοποίησης ο ενεργός τοποθεσία, ελαχιστοποιεί ανάγκη για χειρουργικός βοήθεια και διευκολύνει το δείγμα μετακίνηση. Διαθέσιμος Προστατευτικά τραυμάτων / Συσπειρωτήρας εκτάριο αποστειρωμένο, μίας χρήσης, διαθέσιμος συσκευές και εκτάριο που παρέχεται σε διάφορες διαμέτρους. Αυτά προϊόντα κάνω ΔΕΝ περιέχουν κόμμι ή Δι-αιθυλ-εξύλιο Φθαλικό (DEHP). Οι γιατροί πρέπει επιλέξετε το μέγεθος της συσκευής ήτοι κατάλληλος για ο ειδικός διαδικασία.

Ενδείξεις:

Διαθέσιμος Προστατευτικά τραυμάτων / Συσπειρωτήρας εκτάριο προορίζεται να ανατραπεί ατραυματικά χειρουργικός πηλές και προστατέψουν τους άκρες από την υγρασία απώλεια, μόλυνση και ακούσια εμφύτευση επαφής του όγκου κύτταρα σε ο τοίχωμα του σώματος.

Ομάδα στόχος ασθενών - ενήλικες και νεαροί ασθενείς, άνδρες και γυναίκες.

Προοριζόμενοι χρήστες: το προϊόν προορίζεται για χρήση αποκλειστικά από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό.

Αντενδείξεις:

Κάνω δεν χρήση σε ο έκταση του τοπικός φλεγμονή.

Οδηγίες για χρήση:

1. Προετοιμάζω ο χειρουργικός τοποθεσία σύμφωνα με να πρότυπο διαδικασία.
2. Ανοιχτό ο πακέτο χρησιμοποιώντας πρότυπο άσηπτη τεχνική και βάζω Πληγή Προστάτης / Συσπειρωτήρας επάνω σε ο στείρος πεδίο.
3. Μάρκα ένα τομή που είναι επαρκής να φιλοξενήσει ο Πληγή Προστάτης / Retractor παραπέμποντας στο κόψιμο μήκη λίστα που παρέχεται παρακάτω.
4. Εισάγω ο έγχρωμος δαχτυλίδι του Πληγή Προστάτης / Συσπειρωτήρας μέσα ο τομή.
5. Πιάσιμο ο λευκό εγγύατος δαχτυλίδι με τα χέρια σας τοποθετημένα το ένα απέναντι από το άλλο. Τραβήξτε επάνω επί ο λευκό εγγύς δαχτυλίδι εξασφαλίζοντας ότι το έγχρωμος άπω δαχτυλίδι είναι πλήρως καθιστός εναντίον του περιτονικός ή υπεζωκοτικό στρώμα.
6. Τυλίξτε τον λευκό εγγύς δακτύλιο τυλίγοντας την επάνω άκρη του δακτυλίου μέχρι να αναστραφεί πλήρως ο δακτύλιος. Επαναλάβετε την κύλιση μέχρι να ανασυρθεί η τομή και το χιτώριο του Wound Protector / Retractor να σφίχτει στα τοιχώματα της τομής.
7. Ελέγξτε προσεκτικά ότι κανένα έντερο ή ιστός δεν έχει παγιδευτεί μεταξύ του περιφερικού δακτυλίου και του τοιχώματος του σώματος.
- Σημείωση: Για την αποφυγή παρατεταμένης ισχαιμίας και πιθανής νέκρωσης, κάθε ιστός που έχει παγιδευτεί μεταξύ του αναστολέα και του τοιχώματος του σώματος πρέπει να απελευθερωθεί αμέσως.**
8. Εκτελώ διαδικασία μέσω του πλήρως ανασυρόμενου και προστατευμένου 360° τομή τοποθεσία.
9. Για να αφαιρέσετε Πληγή Προστάτης / Συσπειρωτήρας εισάγω χέρι ή δαχτυλο διά μέσου ο άνοιγμα, πιάσε χρωματιστό άπω δαχτυλίδι και τραβήξτε απαλά το έξω από το τομή.

Τομή μήκη:

Αρ	Μήκος κοπής [c m]	Αρ	Μήκος κοπής [c m]
0221-060070150	2 - 5	0221-180190200	9-16
0221-080090150	2,5 - 6	0221-220230250	11-20
0221-120130150	5 - 10	0221-220230200	11-20
0221-150160150	7 - 13	0221-270280250	14 - 25
0221-180190250	9-16	0221-320330250	17-30



Επιπλέον προειδοποιήσεις και προφυλάξεις:

1. Λαβή κοψτερή όργανα με φροντίδα για την πρόληψη τυχαία κοπή ή παρακέντηση του Πληγή Προστατευτικό / μανίκι συσπειρωτήρα. Τυχαία ζημιά στον συσπειρωτήρα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να αποκοπούν θραύσματα του χιτωνίου και ενδεχομένως να πέσουν στην κοιλότητα του σώματος απαραίτηρη.
2. Μην επεκτείνετε την τομή του τοιχώματος του σώματος πέρα από το συνιστώμενο όριο για το δεδομένο μέγεθος αναστολέα. Μια υπερβολικά μεγάλη τομή μπορεί να προκαλέσει τον έγχρωμο δακτύλιο να χάσει επαρκή εσωτερική στήριξη, οδηγώντας σε πιθανή ολίσθηση από το χειρουργικό τραύμα και περιπλέκοντας τη διαδικασία.
3. Αποφύγετε να κάνετε την τομή μικρότερη από το κατώτερο όριο που συνιστάται για το δεδομένο μέγεθος αναστολέα. Μια τομή που είναι πολύ μικρή θα προκαλέσει τη συστολή του χιτωνίου του συσπειρωτήρα, μειώνοντας τη διάμετρο πρόσβασης στο χειρουργικό σημείο και καθιστώντας τη διαδικασία πιο δύσκολη.
4. Ο έγχρωμος δακτύλιος πρέπει πάντα να τοποθετείται μέσα στην κοιλότητα του σώματος. Η αντίστροφη τοποθέτηση θα αποτρέψει τη σωστή τύλιξη του εξωτερικού δακτυλίου και μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη σωστή ανάσυρση των τοιχωμάτων του σώματος.
5. Αφού αφαιρέσετε το προστατευτικό τραύματος/αναστολέα, ελέγξτε τις άκρες του τραύματος για αιμόσταση.
6. Να είστε προσεκτικοί όταν υπάρχει πιθανότητα έκθεσης σε αίμα ή σωματικά υγρά. Τηρείτε τα πρωτόκολλα του νοσοκομείου σχετικά με τη χρήση προστατευτικής ένδυσης και εξοπλισμού.
7. Απορρίψτε όλες τις ανοιγμένες συσκευές, ανεξάρτητα από το αν έχουν χρησιμοποιηθεί, για να αποτρέψετε την τυχαία επαναχρησιμοποίηση μιας δυνητικά μολυσμένης συσκευής. Η αποστείρωση και η πλήρης λειτουργικότητα της συσκευής μπορούν να διασφαλιστούν μόνο εάν χρησιμοποιηθεί αμέσως μετά το άνοιγμα της συσκευασίας.
8. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή αμέσως μετά το άνοιγμα. Η αποθήκευση της συσκευής μετά το άνοιγμα της συσκευασίας μπορεί να οδηγήσει σε μόλυνση, αυξάνοντας τον κίνδυνο μόλυνσης του ασθενούς.
9. Παίρνω φροντίστε να απορρίψετε ο προϊόν και συσκευασία μετά χρήση, επίσης ως αχρησιμοποίητος αλλά άνοιξε συσκευές συμφωνώς με νοσοκομείο απόβλητα διάθεση πρακτικές και τοπικούς κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, εκείνων που αφορούν την

ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια και το περιβάλλον.

10. Αυτό το προϊόν προορίζεται για μονόκλινο ασθενής και διαδικασία χρήση. Επαναποστείρωση , επαναχρησιμοποίηση, τροποποίηση μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές συνέπειες με θάνατος του ασθενούς που περιλαμβάνεται.
11. Εάν έχει συμβεί κάποιο σοβαρό περιστατικό σε σχέση με τη συσκευή, θα πρέπει να αναφέρεται στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο χρήστης ή/και ο ασθενής.



Διατηρήστε στεγνό



eIFU indicator
www.grena.co.uk/IFU

Συμβουλευτείτε τις ηλεκτρονικές οδηγίες χρήσης



Κατασκευαστής



Ημερομηνία κατασκευής



Προσοχή




Μην επαναποστεριώνετε



Μην το χρησιμοποιείτε εάν η συσκευασία είναι κατεστραμμένη και συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης



Ημερομηνία χρήσης

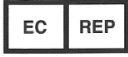

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα



Αριθμός καταλόγου



Κωδικός παρτίδας



Ποσότητα σε συσκευασία



Αποστειρώνεται με χρήση αιθυλενοξειδίου



Μην επαναχρησιμοποιείτε



Ιατρική συσκευή



Μονό αποστειρωμένο σύστημα φραγμού

Τα έντυπα αντίγραφα των οδηγιών χρήσης που παρέχονται με τα προϊόντα Grena είναι πάντα στην αγγλική γλώσσα. Εάν χρειάζεστε ένα έντυπο αντίγραφο του IFU σε άλλη γλώσσα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Grena Ltd. στο ifu@grena.co.uk ή στο + 44 115 9704 800.

Σαρώστε τον παρακάτω κωδικό QR με την κατάλληλη εφαρμογή.

Θα σας συνδέσει με τον ιστότοπο της Grena Ltd. όπου μπορείτε να επιλέξετε eIFU στην προτιμώμενη γλώσσα σας.

Μπορείτε να εισέλθετε απευθείας στον ιστότοπο πληκτρολογώντας www.grena.co.uk/IFU στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

Βεβαιωθείτε ότι η έντυπη έκδοση του IFU που έχετε στην κατοχή σας βρίσκεται στην πιο πρόσφατη αναθεώρηση πριν από τη χρήση της συσκευής. Να χρησιμοποιείτε πάντα το IFU στην τελευταία αναθεώρηση.

